

STRONGER. FASTER. EASIER. SMARTER. CONFIDENCE BY DESIGN.



STRONGER:

40% MORE BREACH RESISTANT¹

SMART-FOLD* pakkemateriale er designet med tanke på at kunne løse dine tungeste opgaver. Dets modstandsdygtige materiale og trelags forstærkede zoner er udviklet til at beskytte dine tungeste bakker og lånesæt mod rifter og snit i håndteringen: de forstærkede zoner er 40% mere modstandsdygtige over for brud end førende konkurrerende produkter.

FASTER: 59% FASTER WRAPPING²


Uafhængige undersøgelser, der sammenligner SMART-FOLD* pakkemateriale med ONE-STEP* sekventielt pakkemateriale, viser en væsentlig hurtigere indpakningstid. Designede guidelinjer og positioneringsstrimler gør indpakningen til en leg. Besparelserne er endnu større – 70% hurtigere sammenlignet med sekventielle indpakningsmetoder.

EASIER: 86% FASTER INSPECTIONS²

SMART-FOLD* pakkemateriale giver mulighed for hurtigere inspektion, når man leder efter rifter, snit og huller hvilket gør det nemmere at bruge. SMART-FOLD* pakkemateriale er stærkere, mere brudsikkert og modstandsdygtigt og kan klare mere håndtering end almindelig pakkemateriale. Men selvom der skulle opstå et brud, gør kontrasten blå og hvide lag, det nemt at tjekke for eventuelle rifter eller snit. Nyttige guidelinjer, der hjælper med en nøjagtig placering af bakkerne, samt positioneringsstrimler, der holder SMART-FOLD* pakkematerialet på plads, hvilket gør at man undgår gætværk og standardiserer indpakningen.

SMARTER: 20% LESS BULK³

Den unikke form på SMART-FOLD* pakkemateriale reducerer overskydende materiale, og det betyder mindre spild. Smart for dit hospital, smart for planeten.

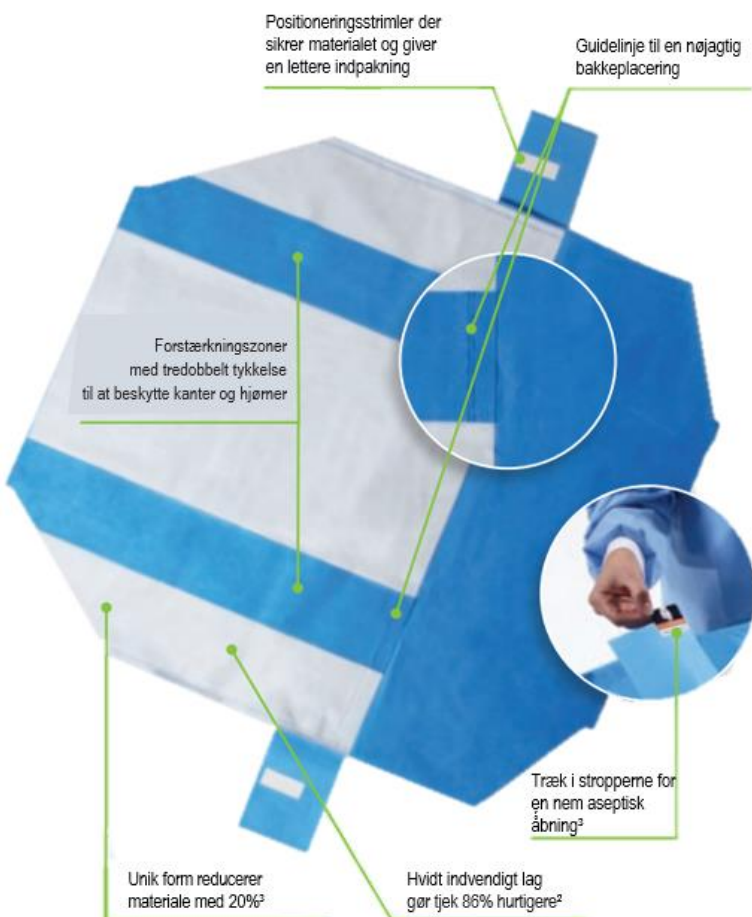



Tjek af materialet er 86% hurtigere med SMART-FOLD* pakkemateriale²

Keep Green in Mind

Unique shape reduces material by 20%.³

SMART-FOLD* Sterilisation Wrap is made from recyclable #5 polypropylene.



Use Once.
Recycle Always.

SERIOUS PROTECTION. BY DESIGN.

- SMART-FOLD* pakkemateriale har POWERGUARD* Teknologi for at opnå det højeste niveau af bakteriel filtreringseffektivitet: 99.9%⁴
- SMART-FOLD* pakkemateriale lever op til ISO 11607-1 og beskytter instrumenter mod kontaminering under opbevaring, transport og håndtering, hvilket er bevist ved en mikrobiel challenge-test.⁵
- Endnu stærkere og mere modstandsdygtig over for skader end ONE-STEP* pakkemateriale.⁶

GODKENDT

COMPATIBLE. BY DESIGN.⁷

Sterilisation Modules

SMART-FOLD*

Pre-Vacuum Steam:

134°C for 3 minutes

134°C for 30 minutes

Ethylene Oxide (EO)

Sterrad® Sterilisation Systems†

†Sterrad NX®, Sterrad 100NX®, Sterrad 100S®

SMART-FOLD* STERILISATION WRAP

Code	Size	Dimensions	Case Count
H650			
14271	Size 1	101 cm x 119 cm	48
14277	Size 3	101 cm x 139 cm	48
14309	Size 10	121 cm x 154 cm	36

Dimensions include side wings and pull tabs.

References

1. Data on file, comparison Medline, claim 07380. 2. Comparison of SMART-FOLD* Wrap to ONE-STEP* Wrap and Sequential Wrap: Kurt Salmon & Associates, Time and Motion Studies on the Labor Requirements of the SMART-FOLD*, ONE-STEP* and Sequential Sterilisation Wraps, June 2011, claims 07443 & 07444. 3. Halyard product specifications claim valid if compared to regular HYH wrap used to package a similar tray size, claim 07454. 4. Materials and preformed sterile barrier systems test performed as per ASTM F2101. ISO 11607-1:2006 Section 2. 5. Whole package microbial challenge study. Data on file. 6. Statistical analysis of side by side testing using sliding compression method EQ-STM-4566 as documented in IPS Report 32912. 7. Data on file GL-DSR00214/15.



KNOWLEDGE NETWORK* Clinical Education
Knowledgeable Customer Support
Expert Sales Force
Tools & Best Practices
Clinical Research
Commitment to Excellence

For more information,
please contact your Halyard Customer Care Team:

UK & IE (toll-free): Tel: 0800 085 82 04 - Fax: 0800 066 91 06
customerservice.uk.ie@hyh.com

South Africa (toll-free): Tel: 0801 111 332 - Fax: 0801 111 335
customerservice.za@hyh.com

Other countries: Tel: +32 2 585 51 14 - Fax: +32 2 897 00 95
customerservice.export@hyh.com



Sterrad NX®, Sterrad 100NX®, Sterrad 100S® are Registered Trademarks of Johnson & Johnson Corporation.

†Registered Trademark or Trademark of O&M Halyard or its affiliates. ©2019. All rights reserved. HC490-02-UK COPY-02129